




液晶表示

暗所でも見やすいバックライト付きの液晶表示。

セットアップメニュー


ハイボルテージ・マイクロカレントの周波数等や、プローブS（赤色LED・近赤外線）・音量に関するより詳細な設定を行うことが可能です。

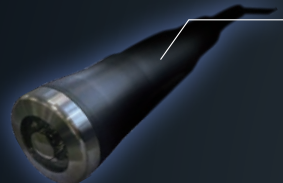

ユーザビリティを追求

プローブ手元部分へ出力レベルを調整するスイッチを搭載。
また、LEDランプにより、使用モードが一目でわかります。

Mediture Series

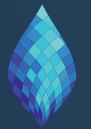

Mediture™ Sleep

Original Pillow



— 快適な眠りと悩みを解決 — 新素材採用オリジナル枕「Mediture Sleep」

- 体重を押し返す力（復元性）が高いため、身動きや睡眠時の寝返りが楽になります。
- 通気性抜群で蒸れることなく、夏でも快適な睡眠環境をご提供します。
- 中のコア材まで洗えるため、清潔にご使用いただけます。
- 素材の細部まで日本の環境に合わせて開発された、安心のMade in Japan。

※仕様及び規格はお断りなしに変更することがあります。 ※製品の色はカタログの色と異なる場合があります。

■製造元



【本社】〒956-0804 新潟県新潟市秋葉区荻島2-30-15
TEL.0250-21-6251 FAX.0250-24-2151

※本誌の一部または全部を無断で複製複製することは複製権（著作権法第21条）の侵害にあたります。
また、それらをインターネットなどで公開することも公衆送信権（著作権法第23条）の侵害にあたります。

施設、店舗経営者・販売代理店向け資料

© Techno Link

■本製品のお問い合わせは

販売店

本体仕様

電源電圧：AC100V^{※1} 電源周波数：50/60Hz^{※1} 電源入力：100VA^{※1} 電池容量：3000mAh
タイマー：1~30分 重量（kg）：1.7 寸法（cm）：W25×D17.5×H9

プローブS搭載LED

近赤外線 波長：860nm 最大出力：(Φ7)約310mW
(Φ10)約400mW
赤色LED 波長：634nm 最大出力：(Φ7)約320mW
(Φ10)約485mW

マイクロカレント波

出力波形：矩形波^{※2} 最大出力電圧：560mVp^{※3}
最大出力電流：800μArms^{※3}

付属品

●ACアダプター ●電源コード ●2P-3P変換プラグ ●プローブL ●プローブS ●サングラス ●ヘッド(Φ10) ●ヘッド(Φ7) ●ジェル ●保証書 ●取扱説明書 ●保証登録はがき


プローブL搭載LED

近赤外線 波長：860nm 赤色LED 波長：634nm
青色LED 波長：465nm 最大出力：約350mW
青色LED・赤色LED・近赤外線 最大出力：約900mW

ハイボルテージ波



出力波形：ツインピーク波^{※2} 最大出力電圧：62.5Vp^{※3}
最大出力電流：17mArms^{※3}

※1 ACアダプター使用時 ※2 正極/負極 ※3 500Ω負荷時

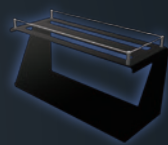

オプション品

本体・プローブを置くことが可能な専用プローブ置きをオプションとしてご購入可能です。

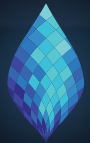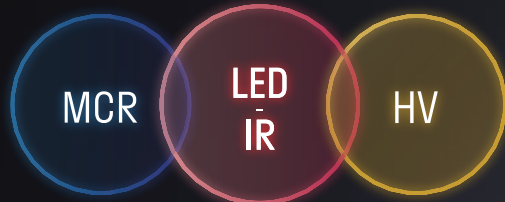


Mediture™ Light

T-P-1907ML1-CA1910-001

光線が包み込む、上質なトリートメント

ハイボルテージ & マイクロカレント 搭載

「ハイボルテージ(HV)」 「マイクロカレント(MCR)」2種類の波形をプローブLに採用しました。
目的に合わせ、出力レベルを設定し使用することが可能です。
また、近赤外線・赤色LED・青色LEDとの同時出力でより幅広い施術が可能になりました。

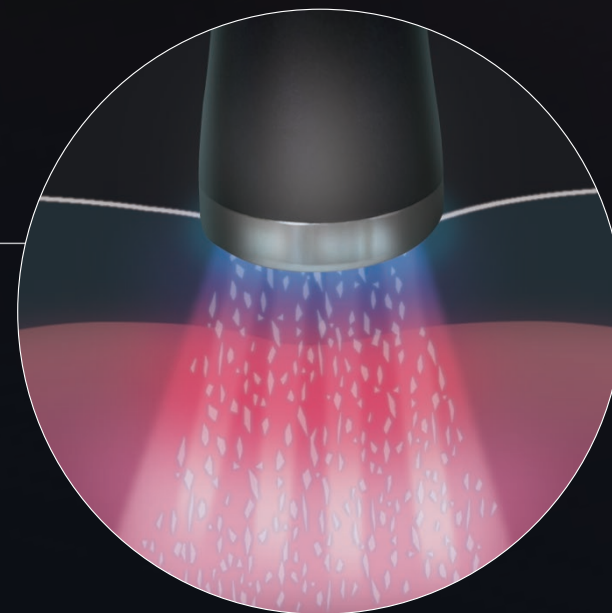

近赤外線 + 赤色LED + 青色LED

プローブSは、赤色LEDと近赤外線(IR)を、
プローブLは、赤色LEDと近赤外線(IR)に加え、表面を整える青色LEDを搭載いたしました。
出力レベル(輝度)や、出力する光線の種類を用途に合わせて選択し使用することができます。

近赤外線 + 赤色LED



青色LED



近赤外線 + 赤色LED + 青色LED



高出力LED & 近赤外線 × HV & MCR

小型、軽量、バッテリータイプ

本体重量1.7kg、バッテリー搭載モデルのMediture Lightは、ACアダプターをコンセントに挿さず使用できるため持ち運びに適しており、使いたいときに場所を選ばずご使用いただけます。

1.7kg

